

# Mepilex® Border Ag

Pansement mousse tout-en-un, antimicrobien et absorbant dotée de la technologie Safetac®


## Pellicule à perméabilité dynamique

- Absorptivité supérieure de l'exsudat
- A l'épreuve de l'eau et protège\* contre les bactéries et virus
- Mince et souple

## Coussin en mousse « contrôle-humidité » multicouche

- Couche en fibre pour une rétention maximale
- Absorption et protection optimale des exsudats
- Épouse les formes du corps

\* microbes plus grand que 25 nm

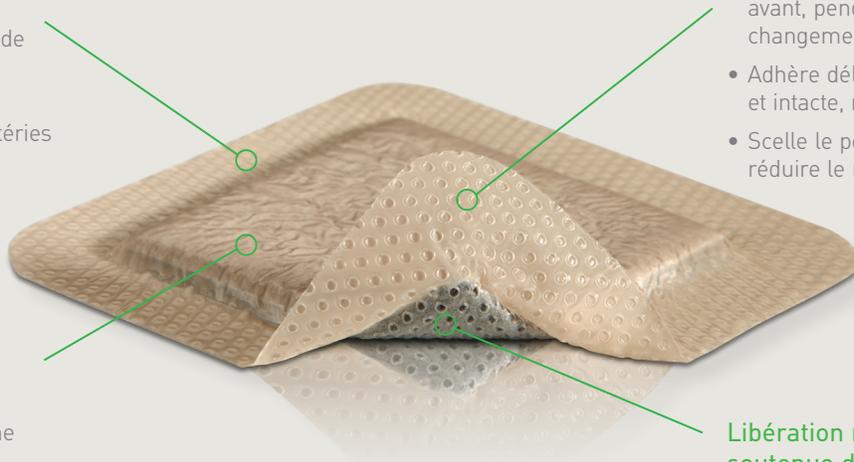

**Safetac®**  
TECHNOLOGIE

## Couche Safetac®

- Réduit la douleur et le traumatisme avant, pendant et après le changement de pansement<sup>1</sup>
- Adhère délicatement à la peau sèche et intacte, mais non à la plaie humide<sup>3</sup>
- Scelle le pourtour de la plaie pour réduire le risque de macération<sup>5</sup>

## Libération rapide et soutenue d'argent ionique

- Désactive les agents pathogènes de la plaie dans les 30 minutes suivant l'application<sup>4</sup>
- Libération soutenue d'argent jusqu'à 7 jours<sup>4</sup>

- Réduit la douleur et le traumatisme associés au pansement<sup>1,2,3</sup>
- Conçu pour le traitement antimicrobien rapide et diversifié et le maintien de l'activité de libération d'argent<sup>4</sup>
- Excellent contrôle de l'exsudat favorisant l'équilibre hydrique

## Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac®, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde<sup>1-3</sup>.


\*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

**Safetac®**  
TECHNOLOGIE


Mepilex® Border Ag

  
Mölnlycke®

## Application de Mepilex® Border Ag

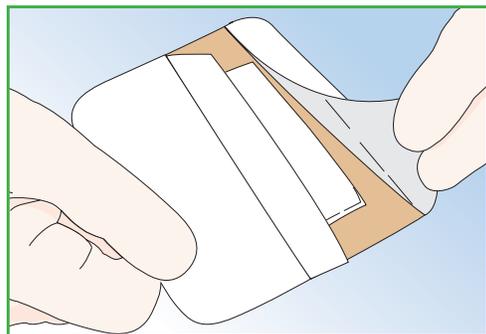

1. Nettoyer soigneusement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Choisir un format qui permet à la bordure adhésive de dépasser la plaie d'au moins 2 cm. Retirer le pellicule.

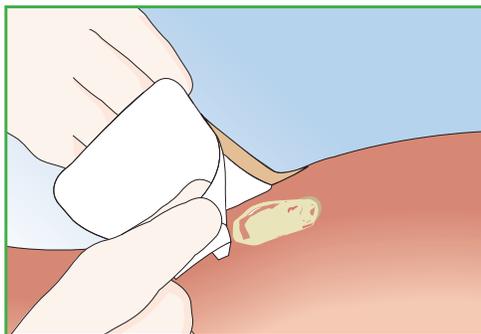

2. Placer le coussin en mousse sur la plaie. Lisser doucement la bordure adhésive en place. Ne pas étirer. Mepilex® Border Ag peut demeurer en place jusqu'à 7 jours, selon le suintement et l'état de la plaie.

### Références :

1. White R, A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1.
2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10.
3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.
4. External lab report: NAMSAs 09C 29253 01/09C 29253 02.
5. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Management, 2003.

## Mode d'action de Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag est une mousse auto-adhérente antimicrobienne dotée de tous les avantages de la technologie Safetac®. Elle adhère délicatement à la peau péri-lésionnelle sans coller aux plaies humides. Cela réduit au minimum la douleur et les traumatismes aux plaies et à leur pourtour. Son coussinet stratifié favorise un équilibre hydrique optimal et une excellente absorption.

Mepilex® Border Ag procure tous les avantages de Mepilex® Border, plus une action antimicrobienne optimale et le contrôle des odeurs. Mepilex® Border Ag désactive les agents pathogènes de la plaie dans les 30 minutes suivant la mise en place et maintient l'action jusqu'à 7 jours. Efficace contre une grande variété d'organismes dont le SARM, l'ERV et les Pseudomonas.

## Avantages de Mepilex® Border Ag

Mepilex® Ag is an antimicrobial soft silicone foam dressing that absorbs exudate and maintains a moist wound environment.

- Aucune fixation supplémentaire requise
- Peut demeurer en place pendant 7 jours selon l'état de la plaie et la quantité d'exsudat
- Entretien un milieu humide sur la plaie
- Faible coefficient de frottement

## Sélection Mepilex® Border Ag (Emballage stérile)

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
395290	7,5 x 7,5	5	70
395390	10 x 10	5	50
395890	10 x 20	5	35
395790	10 x 25	5	35
395990	10 x 30	5	25
395010	12,5 x 12,5	5	50
395490	15 x 15	5	50
395690	15 x 20	5	45

## Mepilex® Border Sacrum Ag

382090	18 x 18	5	40
382490	23 x 23	5	25

\*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site [www.molnlycke.ca](http://www.molnlycke.ca)

## Indications\*

Mepilex® Border Ag est un pansement hydrocellulaire siliconé antimicrobien indiqué dans le traitement des plaies faiblement à modérément exsudatives telles que les ulcères de pieds et de jambes, les escarres et brûlures superficielles. Mepilex® Border Ag peut être utilisé sur des plaies infectées dans le cadre d'un protocole de soins sous le contrôle d'un professionnel de santé qualifié. Mepilex® Border Ag peut être utilisé sous bandages compressifs.

## Précautions\*

- Mepilex® Border Ag doit être utilisé sous le contrôle d'un professionnel de santé qualifié.
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue à l'argent.
- Les cliniciens/professionnels de santé doivent être prévenus qu'il existe très peu de données sur l'utilisation prolongée et répétée des pansements à base d'argent, en particulier chez les enfants et les nouveau-nés.
- Ne pas utiliser Mepilex® Border Ag chez des patients en cours de radiothérapie ou lors d'un examen par radiographie, échographie, diathermie et imagerie CD par résonance magnétique.
- Éviter tout contact avec les électrodes ou les gels conducteurs au cours de mesures électriques, telles que les électrocardiogrammes (ECG) ou électroencéphalogrammes (EEG).
- Ne pas associer Mepilex® Border Ag à des agents oxydants tels que les dérivés chlorés ou le peroxyde d'hydrogène.
- Usage externe uniquement.
- Le produit Mepilex® Border Ag peut provoquer une décoloration temporaire du lit de la plaie et de la peau péri-lésionnelle.
- En cas d'infection clinique, Mepilex® Border Ag ne doit pas se substituer à un traitement systémique ou à tout autre traitement anti-infectieux adapté.
- L'interaction du Mepilex® Border Ag avec d'autres traitements locaux n'a pas été démontrée.
- A l'exception de la solution saline ou de l'eau, interaction du Mepilex® Border Ag avec des agents nettoyants n'a pas été démontrée.
- S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant utilisation. Ne pas restériliser.
- Les propriétés du produit ne peuvent pas être garantie 'en cas d'utilisation après sa date de péremption.

